

Anexa 1


Instrucțiuni de utilizare

Reseligo 3,6 mg trebuie administrat subcutanat la fiecare 28 de zile în peretele abdominal anterior, sub linia ombilicală, folosind tehnica aseptică.

Reseligo 10,8 mg trebuie administrat subcutanat la fiecare 12 săptămâni în peretele abdominal anterior, sub linia ombilicală, folosind tehnica aseptică.


Asezați pacientul într-o poziție confortabilă, cu partea superioară a corpului ușor ridicată. Pregătiți locul de injectare conform reglementărilor și procedurilor locale.

Figura 1

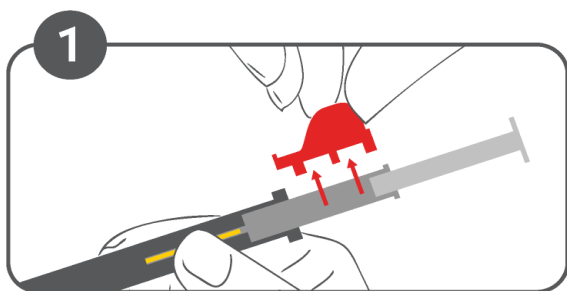


1. Examinați puna și seringă să nu fie deteriorate. Scoateți aplicatorul din ambalajul steril. Verificați dacă implantul este în poziția corespunzătoare în aplicator. Îndepărtați inelul de siguranță (*Figura 1*).

Figura 2

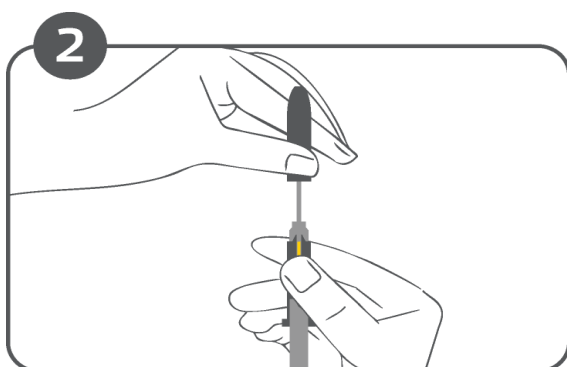

2. Țineți strâns aplicatorul de corpul seringii și scoateți cu atenție capacul acului (*Figura 2*), fără a atinge capacul de ac, pentru a evita îndoirea acului. Spre deosebire de injecțiile cu soluție, nu este necesar să îndepărtați bulele de aer, deoarece o asemenea acțiune poate deplasa implantul medicamentului.


Figura 3

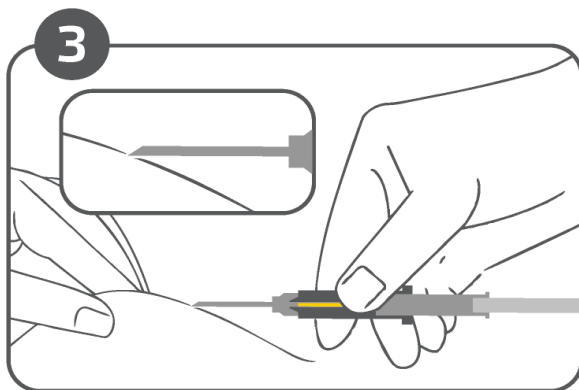

3. Introduceți acul în țesutul subcutanat al peretelui abdominal anterior, de sub linia ombilicală (și nu în mușchi sau în cavitatea abdominală). Formați un pli din pielea pacientului în timp ce țineți ferm corpul seringii și introduceți acul oblic la un unghi de 30 până la 45 de grade (aproape paralel cu pielea) cu deschiderea acului orientată în sus (*Figura 3*). Introduceți acul până când corpul seringii atinge pielea pacientului.


Acest contact cu pielea trebuie să rămână pe parcursul întregului proces de aplicare!

Figura 4

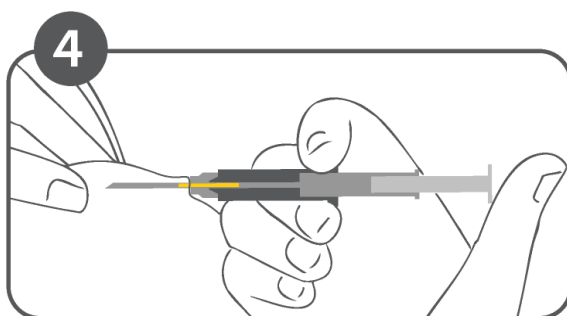


4. Împingeți pistonul seringii. Implantul este transportat la vârful acului (*Figura 4*). Nu trageți seringa înapoi în niciun caz. În timpul aplicării, corpul seringii trebuie să atingă pielea pacientului!

Figura 5

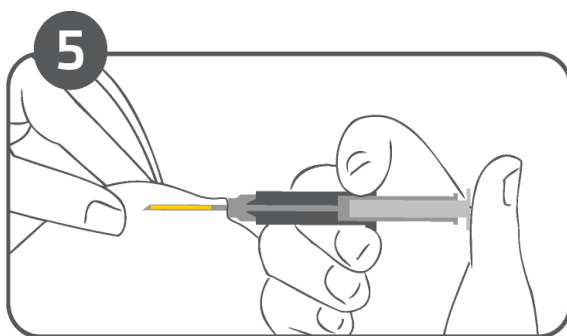


5. Atunci când pistonul se oprește, acul este retras automat (*Figura 5*).

Figura 6

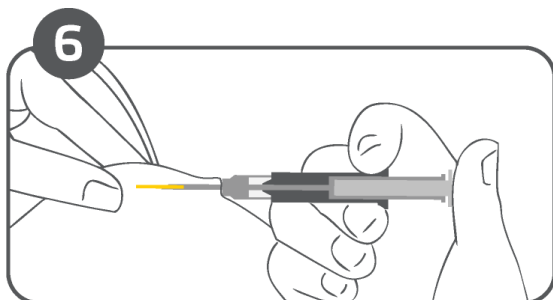

6. Acul se retrage din țesut în corpul seringii (*Figura 6*). Corpul seringii trebuie să rămână în contact cu pielea pacientului. În mod normal, avansarea pistonului spre înainte și retragerea acului se efectuează prin aceeași mișcare lină.

Figura 7

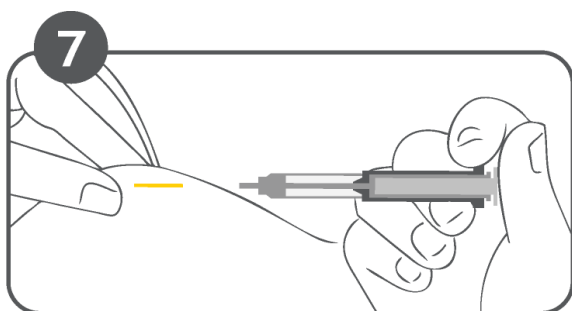

7. Procesul de aplicare este finalizat. Acul a fost retras complet în corpul seringii (*Figura 7*). Mandrina proeminentă protejează împotriva rănirii cu vârful acului.